

Oosafe®

FILTERS

CE Произведено в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и EN ISO 13485:2016



Oosafe®

FILTERS


Фильтр Oosafe® 4 и Фильтр Oosafe® 6 — это магистральные фильтры, устанавливающиеся между CO₂-инкубаторами и источником газа для очистки поступающего CO₂, N₂ и предварительно подготовленной газовой смеси от летучих органических соединений (ЛОС), химически активных соединений (ХАС), микроорганизмов, пыли и других вредных веществ и частиц.

- **Лучшее развитие эмбриона:** очищенный CO₂, N₂ и предварительно подготовленная газовая смесь обеспечивают лучшее развитие эмбрионов.
- **Удаление ЛОС, микроорганизмов и частиц:** сочетание гранул активированного угля, НЕРА-фильтра и фильтров предварительной очистки обеспечивает высокую эффективность удаления ЛОС и улавливания микроорганизмов и частиц (эффективность H14≥99,995%).
- **Строгий контроль качества:** каждый фильтр производится в чистом помещении в полностью контролируемой среде и проходит испытание под давлением для обеспечения безопасности изделия.
- **Замена:** фильтр Oosafe® 4 рекомендуется заменять раз в 4 месяца, а фильтр Oosafe® 6 — раз в 6 месяцев.
- **Одобен учеными:** фильтры Oosafe® уже много лет используются в качестве основного оборудования для очистки газа в клиниках ЭКО по всему миру.
- **Прослеживаемость:** историю изготовления каждого фильтра можно легко отследить по номеру партии, указанному на этикетке.
- **Высокое качество изделий:** продукция изготавливается в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и EN ISO 13485:2016.
- **Упаковка:** каждый фильтр помещается в индивидуальную упаковку и запечатывается. Изделия поставляются в картонной коробке по четыре штуки совместно с сертификатом соответствия и инструкцией по использованию.



ФИЛЬТР Oosafe® 4
(замена раз в 4 месяца)

Кат. номер:
OOIF-SM04

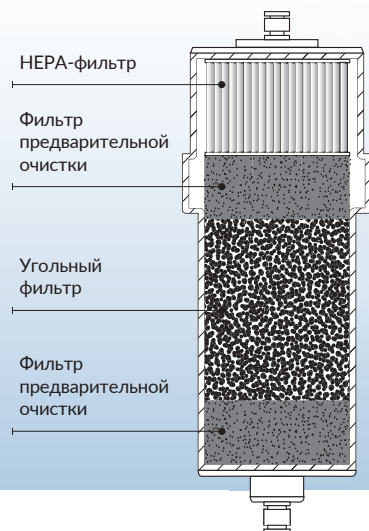

НЕРА-фильтр

Фильтр предварительной очистки


Угольный фильтр

Фильтр предварительной очистки



ФИЛЬТР Oosafe® 6
(замена раз в 6 месяцев)

Кат. номер:
OOIF-ST06

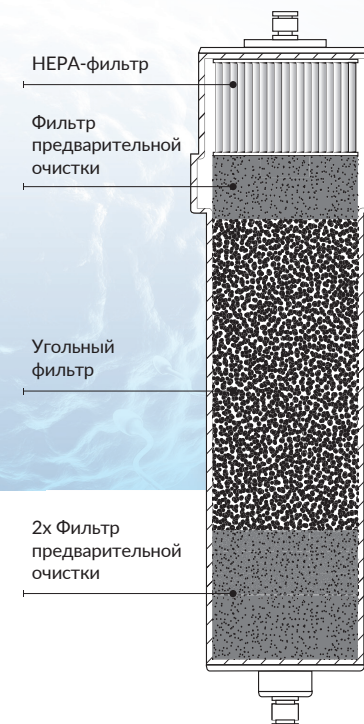

НЕРА-фильтр

Фильтр предварительной очистки

Угольный фильтр

2x Фильтр предварительной очистки

Oosafe®

FILTERS



НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА OOSAFE® К НАСТОЛЬНЫМ ИНКУБАТОРАМ

Набор для герметичного подключения фильтров Oosafe® 4 и Oosafe® 6 к настольным инкубаторам с металлическими газовыми трубками, т.е. к настольным инкубаторам Cook Minc/Origic Planer

- **Простота установки:** комплект для подключения легко подсоединяется к фильтру, инкубатору и источнику газа.
- **Готовый к использованию:** включает все необходимые коннекторы и трубки.
- **Оригинальные коннекторы:** поставляется с коннекторами того же типа, что и установленные на оригинальных шлангах, чтобы исключить утечку газа или проблемы с подключением.
- **В набор для подключения входит:** 2 жестких трубки диаметром 6 мм из полиэтилена (длиной по 50 см каждая), 2 коннектора х 6 мм, 2 быстроразъемных металлических коннектора.



НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА OOSAFE® К
НАСТОЛЬНЫМ ИНКУБАТОРАМ
Кат. номер: **OOFCS-MC**



Каждый фильтр
прошел
предварительное
испытание под
давлением

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФИЛЬТРАМИ OOSAFE®

Для гарантированной эффективной работы используйте только оригинальные изделия!


- Магнитный держатель предназначен для надежного крепления фильтров Oosafe®. Исключает возможность ограничения потока из-за неправильного расположения фильтра. Магнитный держатель можно установить на боковую стенку инкубатора или любую другую металлическую поверхность.
- Коннекторы для фильтров Oosafe® оснащены запорным клапаном, который позволяет легко заменять фильтры даже при включенном потоке газа.
- Доступны коннекторы двух размеров: для жестких шлангов диаметром 6 мм и мягких шлангов диаметром 8 мм.



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ для фильтров Oosafe®
Кат. номер: **OOHLD-01**



КОННЕКТОР для фильтров Oosafe®, для жесткой трубки диаметром 6 мм
Кат. номер: **AS-852086**

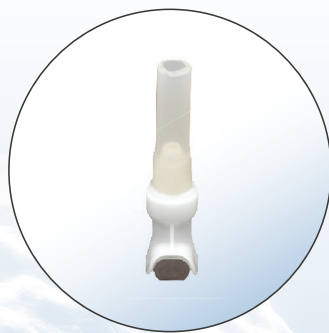

КОННЕКТОР для фильтров Oosafe®, для гибкой трубки диаметром 8 мм
Кат. номер: **AS-852085**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат. номер	
OOIF-SM04	Фильтр Oosafe® 4
OOIF-ST06	Фильтр Oosafe® 6
OOFCS-MC	Набор для подключения фильтра Oosafe® к настольному инкубатору
OOHLD-01	Магнитный держатель для фильтров Oosafe®
AS-852086	Коннекторы для фильтров Oosafe®, для жесткой трубки диаметром 6 мм
AS-852085	Коннекторы для фильтров Oosafe®, для гибкой трубки диаметром 8 мм

4 x



4 x



SparMED ApS
Адрес: Ryttermarken 2,
3520 Farum, DENMARK
Телефон: +45 39-40-25-03

Эксклюзивный дистрибьютор
в России:

FGroup
Адрес: 119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 32, стр. 15
Телефон: +7 495 989-97-72



facebook.com/SparMED
facebook.com/fgrouppmoscow



twitter.com/SparMED



linkedin.com/company/SparMED-ApS

